

Стандарты производства элайнеров

(Стар Смайл стандартные, Стар Смайл IQ, Teen Smile, Kinder Smile,
Ретенционные каппы)

Все перечисленные ниже стандарты распространяются как на первичные заказы, так и на допечатки

Элайнеры Стар Смайл, Элайнеры IQ (взрослые и Teen), Ретенционные каппы

1. Порядок печати элайнеров

При первичном заказе печатают шаги с “0” по “12” и далее по 6 шагов по заказу доктора по мере лечения (кроме заказов, с оплатой в рассрочку)

2. Обрезка элайнеров при наличии восьмых зубов

Если восьмые зубы полностью в зубном ряду и хорошо пропечатаны - обрезаем элайнер по половине восьмого зуба.

Если для закрепления элайнера требуется его фиксация на коронке восьмого зуба - каппу обрезают с захватом восьмых зубов

В противном случае - элайнер обрезаем по седьмые зубы

3. Обрезка элайнера по десневому краю

По умолчанию - обрезка по десневому краю

По запросу доктора - обрезка с захватом десны 2-3 мм

4. Отсутствующие зубы

На место отсутствующего зуба устанавливают “понттик” (перемычка для придания каппе жесткости).

Искусственный зуб устанавливают только по просьбе доктора.

5. Окрашивание

Окрашивание искусственных зубов на элайнеры выполняют только по просьбе доктора (необходимо указать оттенок краски)

6. Тип матрицы

По умолчанию изготавливается мягкая матрица

По просьбе доктора при первом заказе может быть изготовлено 2 матрицы: жесткая матрица и мягкая матрица.

7. Вырезы и крючки

Производство вырезов под кнопки (рис. 1) и крючки (рис. 2) осуществляется в соответствии с одобренным виртуальным сетапом по плану лечения, в котором лечащим врачом предусматривается использование подобной дополнительной аппаратуры (эластичные тяги с кнопками)

Рис.1 Вырезы под кнопки (обведены желтым)


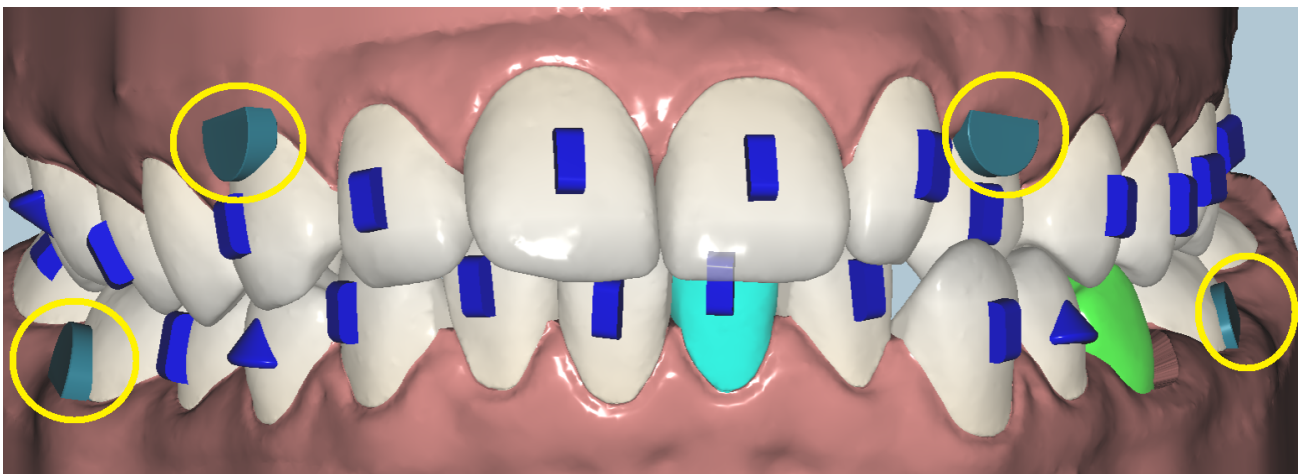


Рис.2 Вырезы под крючки (обведены желтым)

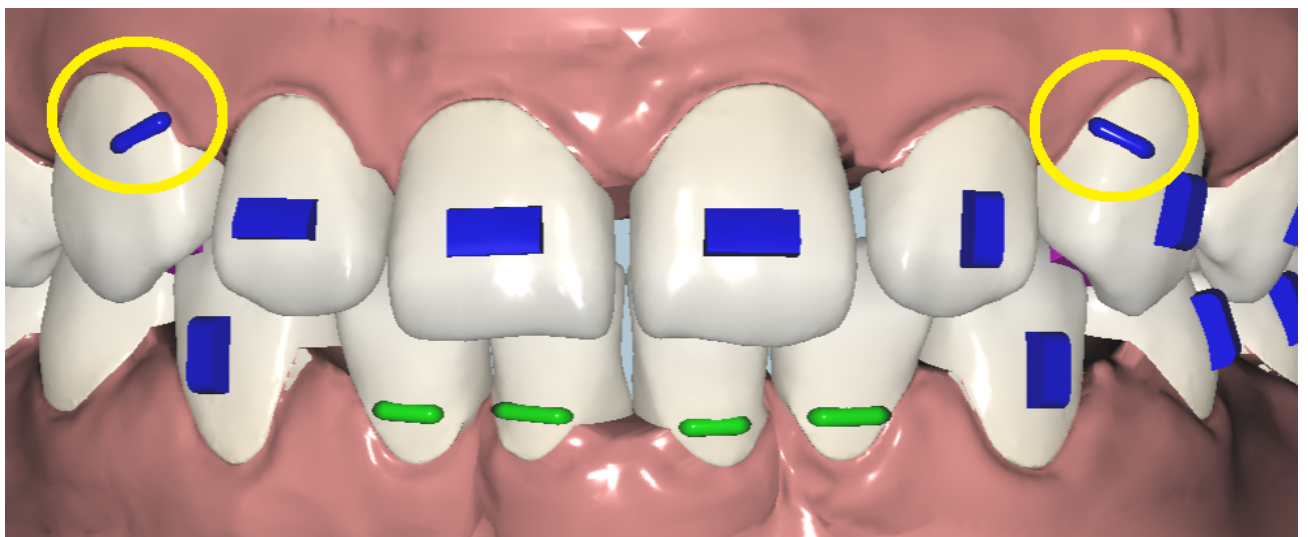

8. Гравировка номера шага

На молярах на верхней и нижней челюсти на жевательной поверхности коронки

9. Смена продукта при изготовлении заказа

Изменение продукта при изготовлении заказа технически невозможно. Нельзя перейти из продукта Kinder Smile в TEEN Smile, потом в Star Smile iQ. Для этого необходимо будет оформить новый заказ.

Смена материала для изготовления капп в процессе лечения - нестандартная операция. Материал менять нельзя.

“TEEN Smile”(подростковые элайнеры)

1. Материал изготовления

Для продукта используется только материал iQ

переход на другой материал не предусматривается

“Kinder Smile”(детские элайнеры)

1. Материал изготовления

Для продукта Версии 1.0

по модели изготавливают 3 каппы на один шаг из материала толщиной: 0,5 мм, 0,6 мм, 0,75 мм

Для продукта Версии 2.0

по модели изготавливают 1 каппу на один шаг из материала толщиной 0,75 мм

Для заказов, оформленных до 01.06.2021, ревизии делают в соответствии с версией продукта 2.0

переход на другой материал не предусмотрен

2. Обрезка элайнера по десневому краю

Коронка детских зубов маленькая, поэтому обрезка элайнера выполняется с заходом на десну на 2-3 мм

3. Тип матрицы:

Обе (Мягкая и жесткая)

4. Компенсаторы прорезывания/отсутствующие зубы

На месте прорезывания постоянного зуба по умолчанию устанавливают компенсатор прорезывания (“искусственный” зуб)

“Понтик” устанавливают только по просьбе доктора.

В случае, если доктор не выразил свои предпочтения при оформлении заказа, продукт будет сделан по стандарту, описанному выше!

Все свои просьбы и предпочтения доктору необходимо указать в плане лечения и необходимые дополнения в чате к заказу до начала производства элайнеров.